

Het 'Square' design van Tokai Sereno!


Het Sereno design wordt gemaakt volgens de meest vooruitstrevende freeform technologie en kan het beste omschreven worden als een '**square design**': naast een **breed vertezicht** biedt de Sereno een **breed tussenzicht** én een **breed leesgedeelte**!

Sereno biedt de drager naast een **ultra comfortabel zichtveld op alle afstanden** eveneens de mogelijkheid **progressieve glazen** te dragen **in een klein en trendy montuur**.



BREED VERTEZICHT

Het brede en comfortabele vertezicht is het resultaat van de **ergonomische analyse van het oog**: de grens van de statische kijkhoek is 15° . Dit komt overeen met een zone van 30mm rond het oogpunt in het glas en is het effectieve kijkgedeelte voor natuurlijk vertezicht. Dit nieuwe en uitzonderlijke Sereno design duwt de aberraties in deze zone zoveel mogelijk naar de zijkant van het glas waardoor een breed en comfortabel vertezicht bekomen wordt.

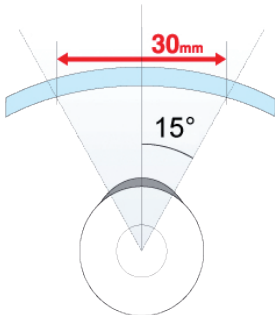

Conventioneel progressief glas



Sereno

BREED TUSSENZICHT



Conventioneel progressief glas



Sereno

Het nieuwe design zorgt er eveneens voor dat ook het **tussenzicht breder** is dan bij een traditioneel progressief glas.

BREED NABIJZICHT

Dankzij het square design, bekomen we nu ook een **breder beeld in het nabijzicht**. Daarenboven is het zicht extra comfortabel door de inset aan te passen volgens de ametropie van de klant en de voorcurve per oog te optimaliseren.



Conventioneel progressief glas



Sereno

